

AIRIAL CHAMBER

HOLDING CHAMBER FOR METER DOSE INHALERS


Model # MQ8000

1




Remove MDI canister mouthpiece cover. Insert MDI canister mouthpiece into the elastic opening at the back of the AIRIAL CHAMBER.

2

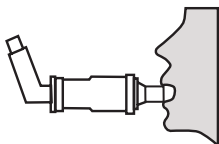


Insert CHAMBER mouthpiece between teeth, seal lips around mouthpiece.

3

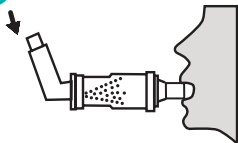

Sit up straight and exhale. Release one puff of MDI Medication into CHAMBER.

4

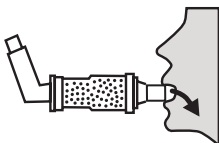

Take a slow, deep breath through the mouthpiece. Hold breath for 5-10 seconds.

AEROCÁMARA AIRIAL

AEROCÁMARA PARA INHALADORES DE MEDICAMENTO


Artículo # MQ8000

1




Retire MDI cubierta de la boquilla bote. Inserte MDI bote boquilla en la abertura elástica en la parte posterior de la AIRIAL CÁMARA.

2

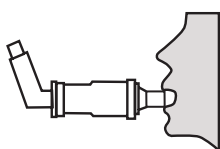


Inserte la boquilla CÁMARA entre los dientes, cerrar los labios alrededor de la boquilla.

3

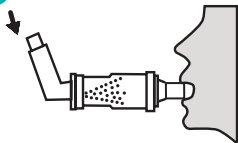

Siéntese derecho y exhala. Suelte una bocanada de MDI medicación dentro de la cámara.

4

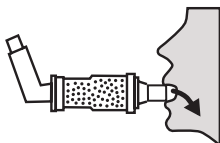


Tome una respiración lenta y profunda a través de la boquilla. Mantenga la respiración durante 5 a 10 segundos.

AIRIAL CHAMBER

COLLAPSIBLE HOLDING CHAMBER FOR METER DOSE INHALERS


Model # MQ8001

1

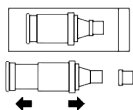


Remove AIRIAL CHAMBER from package. Extend to full length into locked position and remove cap.

2

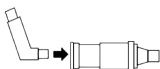


Remove MDI canister mouthpiece cover. Insert MDI canister mouthpiece into the elastic opening at the back of the chamber.

3

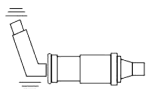


Shake MDI canister and AIRIAL CHAMBER assembly 3-4 times.

4

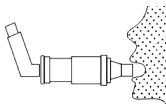


Put Aerial Chamber mouthpiece between teeth. Close lips around mouthpiece.

5

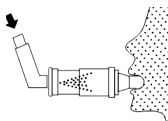

Exhale normally. Press down on MDI canister to release medication.

6

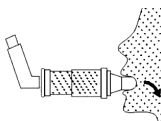

Take a slow, deep breath through the mouthpiece. Hold breath for 5-10 seconds. Exhale through the mouthpiece. Take a second breath to ensure that all medication has been consumed.

Cleaning Instructions: Wash the Aerial Chamber in warm soapy water. Rinse with clean water and set aside to dry.

Precautions: Over time, the elastic rear opening and/or one-way valves may harden and not work effectively. Replace with a new Aerial Chamber.

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Manufactured For: Drive Medical
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Tel: (866) 694-5085

Made in China


www.drivemedical.com

AEROCÁMARA AIRIAL

AEROCÁMARA PLEGABLE PARA INHALADORES DE MEDICAMENTO


Artículo # MQ8001

1

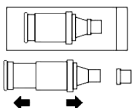


Retire AIRIAL CÁMARA de paquete. Extienda en toda su longitud en posición de bloqueo y retire la tapa.

2

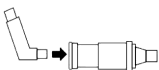


Retire MDI cubierta de la boquilla bote. Inserte MDI recipiente boquilla en la abertura elástica en la parte posterior de la cámara.

3

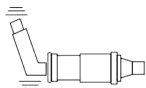


Agite MDI bote y montaje AIRIAL CÁMARA 3-4 veces.

4

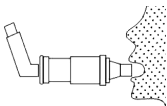


Ponga Cámara Airial boquilla entre los dientes. Cerrar los labios alrededor de la boquilla.

5

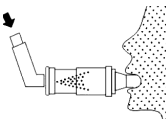

Exhale normalmente. Presione hacia abajo en MDI bote para liberar la medicación.

6

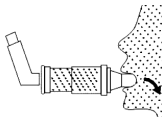

Tome una respiración lenta y profunda a través de la boquilla. Sostenga el beath durante 5-10 segundos. Exhale a través de la boquilla. Tome un segundo aliento para asegurarse de que toda la medicación se ha consumido.

Instrucciones de limpieza: Lavar la Cámara Airial en agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia y deje secar.

Precauciones: Con el tiempo, la abertura posterior elástica y / o de un solo sentido válvulas pueden endurecerse y no trabajar de manera efectiva. Reemplace con una nueva Cámara Airial.

Precaución: Federal (EE.UU.) establece que este aparato a la venta por o a la orden de un médico.



Fabricado por: Drive Medical
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Tel: (866) 694-5085

www.drivemedical.com

Hecho en China